



FRIEND
Plus

 **swidont**
WE SUPPORT YOUR PROFESSION



FRIEND +Plus

SUPPORTIAMO LA VOSTRA PROFESSIONE

La mission di Swident è quella di fornire un valido "supporto di lavoro" al professionista.

L'attuale esigenza espressa dai professionisti odontoiatrici è quella di riunire molteplici soluzioni in un "concept di lavoro" che offra le migliori prestazioni, eccellente ergonomia, la sicurezza di un valido sistema di igiene ed una qualità totale che si traduce in un'assoluta affidabilità.

Friend Plus è il riunito che risponde totalmente a questa esigenza, ed è dedicato al professionista che chiede tecnologia attuale ma facilmente fruibile, un prodotto di design, ed una facile interazione fra dentista - paziente - assistente. Friend Plus è il "supporto di lavoro" che consente di esprimere in maniera personalizzata la Vostra evoluta professionalità.

 **swident**
WE SUPPORT YOUR PROFESSION



Il fulcro di rotazione dello schienale in asse con l'articolazione femorale evita l'effetto spoliamento e la conseguente risistemazione del paziente.



DESIGN: TECNOLOGIA ESALTATA DALLA FORMA

In Friend Plus, design, ergonomia e comfort rappresentano una combinazione ideale in grado di valorizzare al massimo il lavoro del professionista.

La poltrona è sagomata in modo da agevolare i movimenti dell'odontoiatra, assicurando il perfetto contenimento del paziente.

Lo spessore particolarmente ridotto e sagomato dello schienale, permette all'operatore di inserire facilmente le gambe sotto lo schienale e di mantenere sempre posizioni di lavoro ergonomiche.

Le sellerie sono realizzate in poliuretano flessibile, costampate con rivestimento skai bielastico, prive di cuciture e facilmente igienizzabili.

*Sicurezza antischiacciamento schienale.
Sicurezza antischiacciamento base.*

SOLUZIONI PER OGNI ESIGENZA DI LAVORO



Friend Plus è stato progettato per favorire l'integrazione del team odontoiatrico, alleggerire lo stress di operatore, assistente e paziente assicurando massimo rendimento, comfort e sicurezza.

Questo risultato è raggiunto grazie ad esclusive soluzioni e all'accurata scelta di materiali che garantiscono estetica, funzionalità e qualità.



Versatile ed affidabile, Friend Plus si adatta perfettamente al lavoro impegnativo e multi-utente delle grandi cliniche e dei centri ospedalieri.

Il poggiatesta doppia articolazione permette una posizione confortevole senza compressioni sul diaframma o afflusso di sangue alla testa.

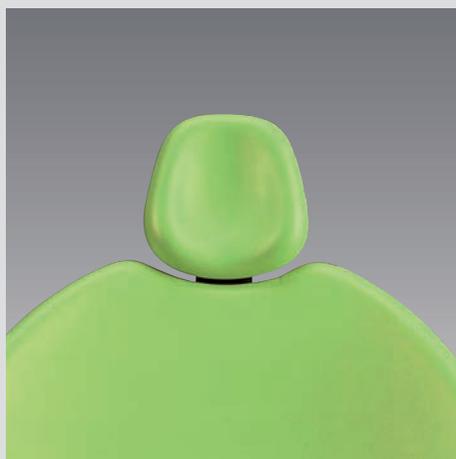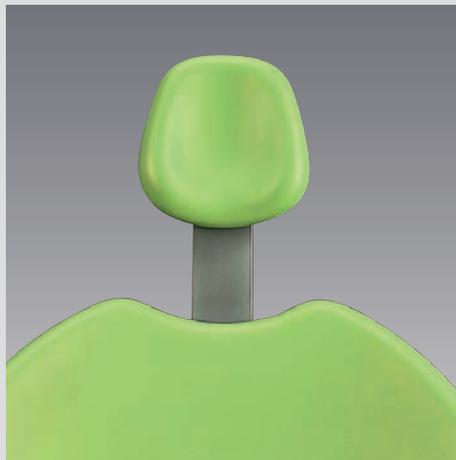

La conformazione dello schienale, unita alla caratteristica del poggiatesta doppia articolazione, assicura abitabilità e posizione corretta anche per pazienti di piccola corporatura o per bambini.

POGGIATESTA DOPPIA ARTICOLAZIONE



BIOS: COMFORT E SICUREZZA

Il poggiatesta Bios, grazie alle sue peculiari caratteristiche di mobilità e bloccaggio, consente di posizionare correttamente la testa del paziente accompagnandone i movimenti articolari, ottenendo così il massimo comfort.

Un corretto assetto operativo ed un paziente comodo e rilassato, permettono di operare con più tranquillità e sicurezza.

POGGIATESTA BIOS (OPTIONAL)



Le movimentazioni di Bios seguono l'articolazione orbitale delle vertebre interessate.

Bios permette di ottenere con grande precisione e stabilità ogni posizione ed assetto operativo.

TECNOLOGIA AMICA PER UN'OPERATIVITÀ IMMEDIATA

Swident ha adottato la migliore tecnologia disponibile e l'ha interpretata per offrire una operatività immediata, intuitiva ed alla portata di tutti.

L'ampia escursione ed il perfetto bilanciamento dei bracci permettono di raggiungere facilmente la migliore posizione di lavoro.

Il braccio bilanciato Swident è in grado di fornire un buon bilanciamento, una piacevole sensazione di mancanza di peso dello strumento ed una eccellente mobilità laterale del manipolo.

Il cordone degli strumenti offre un'elevata elongazione. La strumentazione si presenta in maniera armoniosa, rassicurante ed estremamente rilassante per il paziente.

Pulsanti sottomembrana e display permettono di gestire tutte le principali funzioni con semplicità, avendo sempre sotto controllo lo stato di lavoro del riunito e degli strumenti.

Dotazioni di serie e configurazioni opzionali consentono di personalizzare la propria unità, adattandosi perfettamente alle esigenze di ogni singolo team odontoiatrico.





CONSOLLE ODONTOIATRA

- Semplicità e completezza di informazioni.
- Rapida regolazione degli strumenti e delle funzioni riunito e poltrona.
- Impostazione e visualizzazione del sistema d'igiene.
- Impostazione e visualizzazione della percentuale di velocità del micromotore.
- Impostazione e visualizzazione della percentuale di intensità di vibrazione dell'ablattore.
- Impostazione e visualizzazione luce fredda strumenti.
- Impostazione e visualizzazione della rotazione antioraria del micromotore.
- Pulsanti di movimentazione della poltrona a doppia funzione (movimenti e 4 posizioni memorizzabili).
- Pulsanti per lavaggio bacinella e acqua al bicchiere.
- Pulsante comando lampada.
- Configurazione fino a 5 strumenti fibrati.



IGIENE

L' alloggio degli strumenti operativi in silicone morbido è asportabile ed autoclavabile. La maniglia per la movimentazione della tavoletta medico è smontabile ed autoclavabile. I comandi sottomembrana della consolle medico sono facilmente pulibili.



COMANDI A PEDALE

In Friend Plus tutti i comandi di base sono attivabili dalla pedaliera per assicurare una maggiore igiene, risparmio di tempo e massima concentrazione sul paziente.

INTERAZIONE FLUIDA

Supportato da un doppio braccio articolato che consente tutte le posizioni operative, il modulo periferico assistente ha struttura monolitica per una facile igienizzazione. Può ruotare di 200° per offrire sempre l'accessibilità ai comandi e agli strumenti in linea retta con l'operatore.

La consolle di comando con pulsanti sottomembrana permette di gestire in modo immediato le funzioni del gruppo idrico della poltrona.





CONSOLLE ASSISTENTE

La consolle periferica assistente gestisce tutte le funzioni del gruppo idrico, per la massima interazione del team odontoiatrico.

È predisposto per 3 alloggiamenti: due cannule di aspirazione ed uno strumento (siringa o lampada polimerizzante).

I comandi della consolle sono sottomembrana facilmente igienizzabili.

La maniglia per la movimentazione del modulo è smontabile ed autoclavabile.



IGIENE

Un sistema completo di igiene attiva e passiva nasce da una progettazione orientata alla sicurezza del paziente e del team odontoiatrico.

Il convogliatore cannule è facilmente accessibile. L'ampia superficie filtrante assicura la massima efficienza e riduce la necessità di frequenti svuotamenti.



PRATICITÀ

Friend Plus ha adottato bocchettoni completamente smontabili per consentire una perfetta pulizia e sterilizzazione.

PIÙ SPAZIO OPERATIVO

Friend Plus, grazie ad un gruppo idrico estremamente compatto ed alla bacinella ruotante di 180°, libera spazio solitamente non fruibile. Questo permette di avere a disposizione maggiori opzioni operative, agevolando il lavoro del team odontoiatrico.

Le superfici sono realizzate con tecnopolimeri altamente resistenti ai disinfettanti chimici.





IGIENE

La bacinella e il porta bicchiere sono costituiti da un monoblocco ceramico facilmente estraibile. Fontanella di lavaggio bacinella e acqua al bicchiere sono rapidamente asportabili ed autoclavabili.



SPAZIO ED IGIENE

La bacinella in ceramica priva di interstizi e fessurazioni, elimina possibili sacche di contaminazione batterica e la propagazione di fluidi itineranti.

La rotazione a 180° aumenta lo spazio utile e ne consente un più agevole uso al paziente.



SAFESPRAY (optional)


Safespray è composto da un contenitore pressurizzato che consente l'utilizzo di acqua distillata (eventualmente addizionata con igienizzanti) destinata agli spray di tutti gli strumenti della tavoletta medico e della siringa assistente.

Safespray è un sistema in grado di contrastare efficacemente i rischi di contaminazione offrendo una postazione di lavoro sicura e con alto livello di affidabilità igienica.

PERSONALIZZA LA TUA POSIZIONE DI LAVORO

Friend Plus è stato concepito per permettere all'odontoiatra di operare comodamente in tutte le posizioni comprese tra le ore 8 e le ore 14, senza stress e con il massimo comfort per il paziente.

Esclusive soluzioni progettuali /costruttive e l'accurata scelta di materiali con caratteristiche di resistenza all'usura, assicurano grande affidabilità, facile e rapida manutenzione, sicurezza e tranquillità operativa. Tranquillità sostenibile nel tempo grazie all'assistenza qualificata ed efficiente garantita dagli Swident Point.

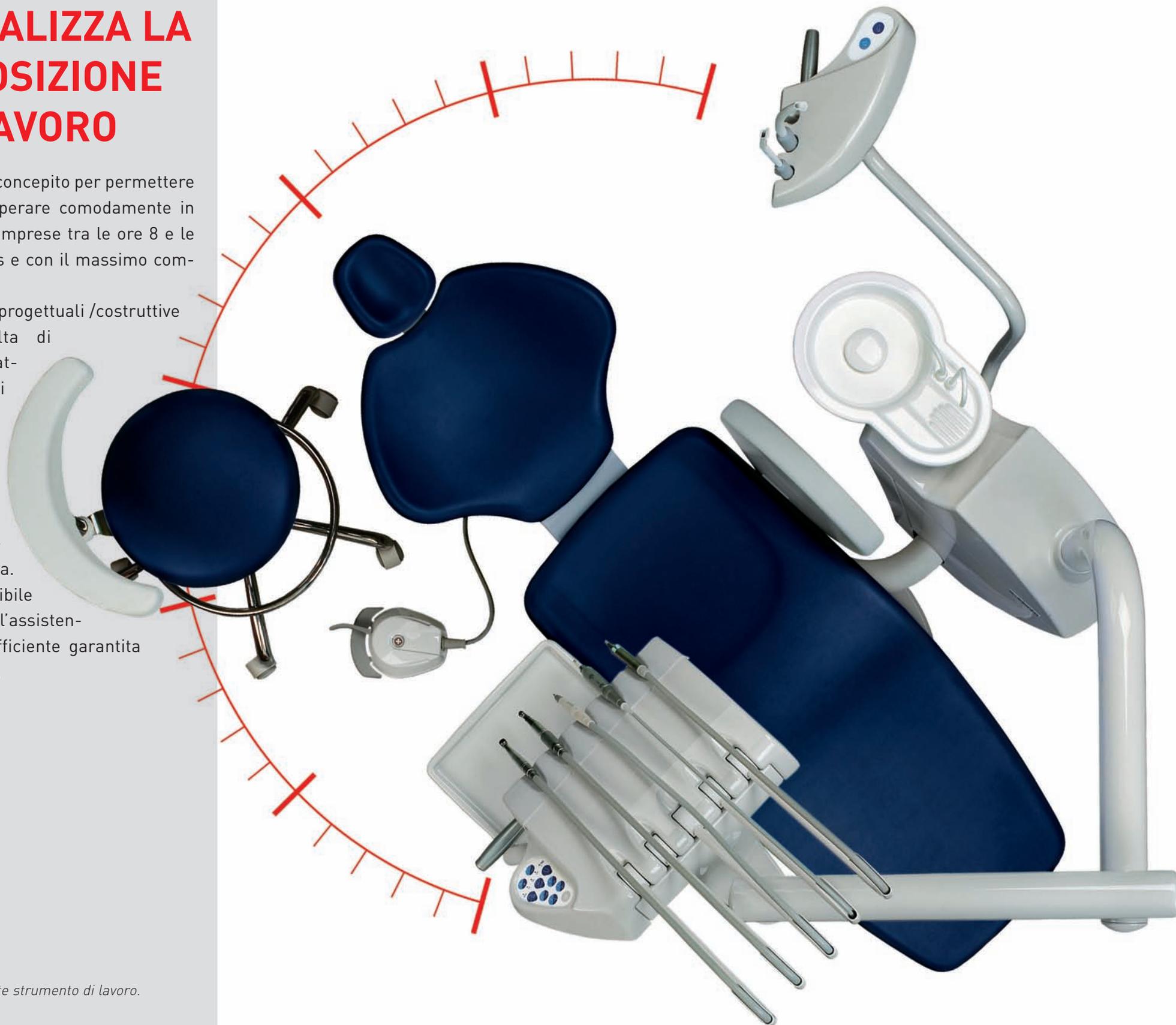

Friend Plus: un eccellente strumento di lavoro.



LAMPADA SCIALITICA SWIDENT EDI

EDI, con movimento di rotazione su 2 assi, permette il preciso adattamento dello spot al cavo orale da ogni angolazione.

Dotata di schermo frontale amovibile per facilitare le operazioni di pulizia e di ventilatore posto sul retro estremamente silenzioso.

- Intensità luminosa 25.000 Lux.
- Temperatura di colore 5.000° K.
- Dimensioni spot luminoso 60 mm x 180 mm.
- Rotazione su 2 assi.
- Regolazione dell'intensità luminosa.
- Schermo di protezione amovibile di facile pulizia.
- Maniglie smontabili ed autoclavabili.



LAMPADA SCIALITICA SWIDENT RHA

RHA, con movimento di rotazione su 3 assi, permette il preciso adattamento dello spot al cavo orale da ogni angolazione.

Programmazione su 3 livelli di luminosità diversi.

- Ventilatore posto sul retro estremamente silenzioso.
- Intensità luminosa regolabile su 3 livelli (22.000 Lux / 36.000 Lux / 40.000 Lux).
- Temperatura di colore 4.700° K.
- Dimensione spot luminoso 60 mm x 180 mm.
- Rotazione su 3 assi.
- Maniglie smontabili ed autoclavabili.



SAFE AIR SYSTEM

Oltre al dispositivo anti-retrazione dei liquidi, il SAS prevede all'emissione di un flusso d'aria a fine impiego della strumentazione rotante, che allontana i residui liquidi e solidi dai manipoli.

Inoltre l'aria di ritorno dagli strumenti rotanti viene riemessa in atmosfera attraverso un filtro HEPA (High Efficiency Particulate Air) che garantisce una riduzione del livello di contaminazione.

**SEDUTI
COMODAMENTE**



SYNCRO T5
Seggiolino anatomico medico

Il sedile anatomico ed il movimento sincronizzato dello schienale permettono al medico di sedere nella posizione più comoda e corretta.

- Regolazione altezza seduta.
- Regolazione inclinazione schienale con movimento sincronizzato del sedile (punto a punto).
- Regolazione altezza schienale e del supporto lombare.
- Tilting schienale.
- Regolazione altezza ed inclinazione con leva unica.
- Posizione di lavoro dinamica (contatto permanente).
- Cuscini anatomici privi di cuciture e facilmente igienizzabili.
- Appoggiatesta (optional).

**MASSIMA
ERGONOMIA**



Il sedile anatomico ed il movimento sincronizzato dello schienale permettono al medico di sedere nella posizione più comoda e corretta.

- Regolazione altezza seduta.
- Regolazione inclinazione schienale con movimento sincronizzato del sedile (punto a punto).
- Regolazione altezza schienale e del supporto lombare.
- Tilting schienale.
- Regolazione altezza ed inclinazione con leva unica.
- Posizione di lavoro dinamica (contatto permanente).
- Cuscini anatomici privi di cuciture e facilmente igienizzabili.
- Appoggiatesta (optional).

SYNCRO T3
Seggiolino anatomico medico



**RAPIDITÀ
OPERATIVA**



ASSIST
Seggiolino anatomico assistente

Il sedile rotondo e lo schienale-bracciolo semitondo, permettono all'assistente di sedere comodamente, mantenendo la massima rapidità operativa.

- Regolazione altezza seduta.
- Schienale-bracciolo configurabile in 3 posizioni.
- Cuscino anatomico privo di cuciture facilmente igienizzabile.
- Appoggiatesta (optional).



Il sedile rotondo e lo schienale-bracciolo semitondo, permettono al medico di sedere comodamente, mantenendo la massima rapidità operativa.

Lo schienale-bracciolo è regolabile in altezza senza l'uso di leve o pulsanti e garantisce un valido appoggio sia per la schiena che per le braccia.

- Regolazione altezza seduta.
- Schienale-bracciolo configurabile in 3 posizioni.
- Schienale-bracciolo regolabile in altezza (up & down).
- Cuscino anatomico privo di cuciture facilmente igienizzabile.
- Appoggiatesta (optional).

ASSIST PLUS

Seggiolino anatomico medico/assistente

**VALIDO
SUPPORTO**





SW SWIDENT SA

Via G. Cattori, 3
Casella Postale 730
6902 Paradiso - Lugano (Switzerland)
www.swident.ch



SWIDENT SRL

Via Cicogna, 34/ A
40068 San Lazzaro di Savena - Bologna (Italy)
Tel. +39 051 6258657 - Fax +39 051 6285929
www.swident.it